

Albo Land srl

Via Mastroianni,9

40013 Castel Maggiore BO (Italy)

Tel:+39 051/373838 Fax: +39 051/371877

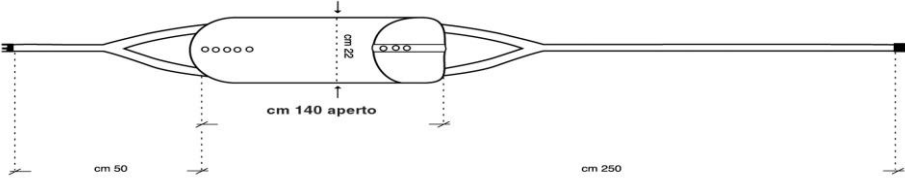
P.IVA: 01778301208

Capitale Sociale €12000 I.V.

www.alboland.com info@alboland.com

R.E.A. 387661 Iscr.Reg.Imp.BO 163652

ALBO Land TM
BOLOGNA - ITALIA s.r.l.

REF 687	 Albo Land s.r.l.	Data di produzione. Vedi Lotto	Ultima modifica. 23/05/2018
CINTURA CONTENIMENTO LETTO SEMPLICE REGOLABILE.			
			
MISURE: UNICA DA CM.70 A CM.120 DI CIRC.VITA		COLORE: ECRU'	
INDICAZIONI: INDICATO PER PAZIENTI COSTRETTI A <u>LETTO ED INCAPACI DI COOPERARE</u> . QUESTA CINTURA CONSENTE DI RUOTARE IL PAZIENTE SU DI UN LATO PER NECESSITA'.		LAVAGGIO: LAVARE IN ACQUA TIEPIDA A 30° CON DETERSIVO PER CAPI DELICATI, NON STRIZZARE NON CENTRIFUGARE ED ASCIUGARE LONTANO DA FONTI DI CALORE.	
COMPOSIZIONE: GALLONE ORTOPEDICO 100% COTONE - OCCHIELLI OTT/NK. FIBBIA TRIDENTE DI mm50 PLASTICA ACETILICA RESISTENZA 100kg CERTIFICATI		CONTROINDICAZIONI: SE SEGNALATE DAL MEDICO CURANTE.	
ISTRUZIONI: 1- AVVOLGERE IL TIRANTE LUNGO, ATTORNO ALLA BASE DEL LETTO PRIMA DI CHIUDERLO CON LA FIBBIA LATERALMENTE. 2 -CHIUDERE IL BUSTINO RIGIDO ATTORNO ALL'ADDOME DEL PAZIENTE SOVRAPPONENDO LA PATTA CON I DUE OCCHIELLI ALL'ALTRA. 3- FISSARE CON L'APPOSITO BOTTONE DI SICUREZZA (COD. 690M e COD. 691M (venduti a parte)		CONFEZIONE: IN SACCHETTO DI PLASTICA.	
AVVERTENZE: DISPOSITIVO NON STERILE SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI LAVAGGIO. <u>IN CASO DI URGENZE AVERE SEMPRE A PORTATA DI MANO UNA FORBICE O COLTELLO PER TAGLIARE LA CINTURA.</u>		GARANZIA: IL PRESIDIO E' GARANTITO A NORMA DI LEGGE. PER I DIFETTI DI FABBRICAZIONE, SONO ESCLUSE LE PARTI DI CONSUMO. QUESTO PRODOTTO DEVE ESSERE UTILIZZATO DA PERSONALE ESPERTO.	
NECESSARIE:  bottoni 690M + chiave 691M	687 N° progressivo: 149424 GMDM: 35305 CND: M030599		